

# Monitor Ambulatorio de Presión Sanguínea 24 Horas

 SunTech Medical®  
Brilliant Blood Pressure Solutions™

## ***Bravo***<sup>™</sup> **24-HR ABP**



El mejor valor en tecnología ambulatoria  
es también el más fácil de usar.

- Fácil instalación
- Bajo consumo de energía
- Compacto y ligero



# Bravo™ - Sistema Ambulatorio de Monitorización de la Presión Sanguínea

**SunTech Medical**  
Brilliant Blood Pressure Solutions™



## La nueva norma en PSA

[www.SunTechMed.com](http://www.SunTechMed.com)  
[sales@SunTechMed.com](mailto:sales@SunTechMed.com)

El monitor ambulatorio de presión sanguínea Bravo tiene un diseño compacto y eficiente que proporciona una solución efectiva con respecto al costo, para monitorear las presiones sanguíneas de sus pacientes fuera del medio ambiente clínico. El monitor Bravo interactúa con el software AccuWin Pro™ PC para una rápida programación, recuperación de datos y generación de reportes.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

**Asequible:** Un valor excepcional que ayuda a los presupuestos de recursos limitados.

**Rápida instalación:** A tecnología oscilométrica hace que la instalación en el paciente sea fácil, ahorrando tiempo a su personal.

**Fácil de utilizar:** Utilice el sistema inmediatamente con el manguito PSA incluido, los accesorios y las baterías.


**Seguridad de los datos:** Los datos de PS guardados en la memoria de flash hacen que no se pierdan datos y que no haya que repetir estudios.

**Bajo consumo de energía:** Requiere sólo dos baterías AA, haciendo que Bravo sea mucho menos caro de operar que la mayoría de las alternativas.

**Comodidad del paciente:** Las presiones de inflado ajustables máxima y dinámica mejoran la comodidad del paciente y su cumplimiento con las normas.

### ACCUWIN PRO

- Cree un programa de monitorización ajustado a un paciente individual con hasta 3 periodos de tiempo específicos.
- Genere reportes clínicos personalizados con datos de PSA que se muestran claramente en numerosos formatos gráficos y/o formatos tabulares.
- La información de reporte diagnóstico incluye todos los datos de PS recogidos, latidos del corazón, presión arterial promedio, carga de PS y promedios calculados para el día, la noche y el estudio general.

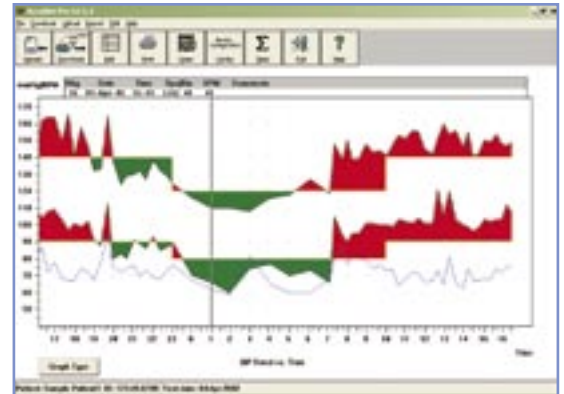

### QUÉ ESTÁ INCLUIDO

- Monitor de PSA Bravo
- CD de software AccuWin
- Funda de monitor, cinturón y cinturón de hombro
- 4 baterías AA
- Manguito de PSA de SunTech (rango de 27-42 cm)
- Diarios del paciente
- Manual del usuario y guía rápida

### ESPECIFICACIONES

**Técnica:** Oscilometría con desinflado por pasos  
**Validaciones:** ANSI/AAMI SP10:2002  
**Rango PS:** 25-260 mmHg  
**Rango cardíaco:** 40-200 bpm  
**Muestra de memoria de datos:** La memoria flash almacena hasta 250 lecturas  
**Periodos:** 3 periodos de tiempo programables de forma independiente  
**Opciones:** Versiones disponibles en otras lenguas

**Garantía:** 1 año de garantía estándar  
**Tecla de eventos:** El equipo programable permite al paciente iniciar lecturas adicionales.  
**Fuente de energía:** 3 VDC - dos baterías recargables 1.5V "AA" Alcalinas o NiMH  
**Dimensiones:** Aprox: 12 X 7 X 3 cm  
**Peso:** 265 gramos, incluyendo las baterías  
**Requerimientos PC:** Puerto serial de 9 pin (adaptador USB opcional) Windows 98 y superior

507 Airport Blvd., # 117  
Morrisville, North Carolina 27560-8200 USA  
Teléfono: 919.654.2300  
Fax: 919.654.2301  
Correo electrónico: [sales@SunTechMed.com](mailto:sales@SunTechMed.com)

Oakfield Industrial Estate  
Stanton Harcourt Road  
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS England  
Teléfono: +44 (0) 1865 884 234  
Fax: +44 (0) 1865 884 235

  
0413

82-0024-01 Rev B